

ENGLISH | Instructions for Use

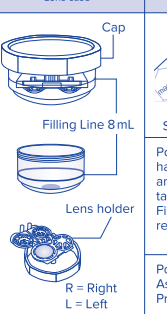
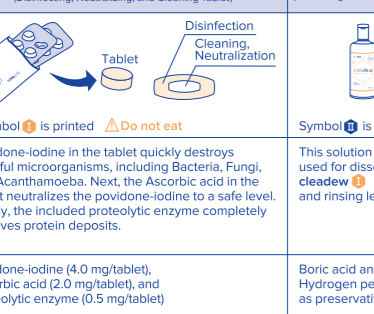
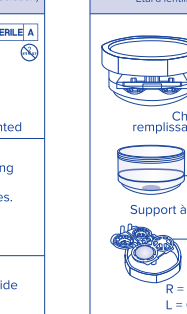
Disinfecting, Cleaning and Storing System

Contact lens disinfection system which disinfects, neutralizes, and removes protein deposits for all soft contact lenses including silicone hydrogel lenses.







Read this instruction sheet carefully before using **cleadow**, and keep it for future reference. To avoid eye infections or damage, always follow the user instructions.

COMPOSITION AND DESCRIPTION

Do not use **cleadow** if allergic to any of the ingredients used in **cleadow**.

| cleadow | cleadow I | cleadow II |
|--|--|---|
| Lens case (Disinfecting, Neutralizing, and Cleaning Solution) | (Disinfecting, Neutralizing, and Cleaning Tablet) | (Dissolving & Rinsing Solution) |
|  Filling Line 8 mL R = Right L = Left |  Symbol I is printed, Δ Do not eat Povidone-iodine in the tablet quickly destroys harmful microorganisms, including Bacteria, Fungi, and Acanthamoeba. Next, the Ascorbic acid in the tablet neutralizes the povidone-iodine to a safe level. Finally, the included proteolytic enzyme completely removes protein deposits. |  STERILE A Symbol II is printed This solution is used for dissolving cleadow I and rinsing lenses. |
| | Povidone-iodine (4.0 mg/tablet), Ascorbic acid (2.0 mg/tablet), and Proteolytic enzyme (0.5 mg/tablet) | Boric acid and Hydrogen peroxide as preservative |

USER INSTRUCTIONS

- 1  Open the lens holders and place each lens on each dome. Close the lens holders with care.
- 2  Add a tablet of **cleadow I** into the lens case and fill the case with **cleadow II** up to the filling line. Do not use tablet if discoloured or broken.
- 3  Soak the lenses for **at least 4 hours**. Cleaning process begins after the solution colour changes.
- 4  **Check colour!** Ensure that solution and lens are completely clear. If orange colour remains even after 4 hours, see **PRECAUTIONS** below.
- 5  Remove the lenses.
- 6  Rinse lenses in the palm of your hand with **cleadow II** before wearing them.

STORAGE

After completing the above steps, in case of storing the lens for more than 24 hours, you should replace the solution with **cleadow II** as a conservation solution. It is recommended to use the solution. You may store the lens in the unopened lens case up to 7 days, and then repeat the care steps from the beginning before wearing your lens.

WARNINGS

- Do not use **cleadow** if allergic to any of the ingredients used in **cleadow**.
- If you experience persistent eye discomfort, excessive tearing, vision changes, or redness of the eye, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use **cleadow** with any eye medication or other contact lens care products.

PRECAUTIONS

- Read this instruction sheet carefully before using **cleadow** and keep it for future reference.
- To avoid eye infections, always follow the user instructions.
- Always wash and dry your hands completely before handling your lenses.
- The solution does not turn orange after you have added a tablet, discard the solution, wash and dry the lens case, and then repeat the care steps from the beginning, in accordance with the user instructions.
- Do not wear your lenses if the orange stain persists.
- Consult your eye care practitioner if you have worn un-neutralized lenses.
- Ensure that solution and lens are completely clear before wearing the lenses. If orange colour remains after 4 hours, lightly shake the lens case and leave it aside for 20–30 minutes. Check if the colour has disappeared. If orange colour persists, discard solution and repeat care steps from the beginning.
- After each use, discard any **cleadow** solution that remains in the lens case.
- After each use of **cleadow**, wash the lens case with sterile saline solution and allow it to air dry.
- Children should not use **cleadow** by themselves; parents are requested to be responsible for their daily care.
- Ensure that solution and lens are completely clear before wearing the lenses. If orange colour remains after 4 hours, lightly shake the lens case and leave it aside for 20–30 minutes. Check if the colour has disappeared. If orange colour persists, discard solution and repeat care steps from the beginning.
- Do not replace **cleadow I** with any other container.
- Do not use **cleadow** with an old lens case.
- Always use the new lens case provided.
- Use the tablet immediately after opening the package.
- Always store the tablets in their aluminum package when not in use.
- Do not change the contact lens care system without consulting eye care professional.

FRANÇAIS | Mode d'emploi


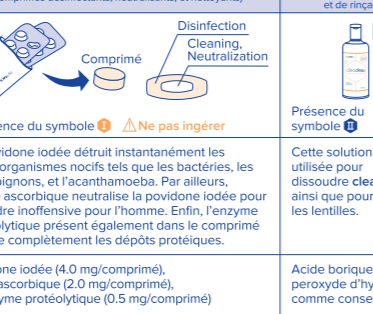

Système de désinfection, de nettoyage et de conservation

Système de désinfection des lentilles de contact qui désinfecte, neutralise et enlève les dépôts de protéines sur tous types de lentilles souples, y compris les lentilles en silicone hydrogél.





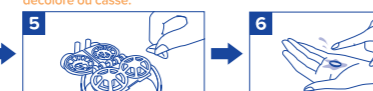

Lire attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadow** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.

COMPOSITION ET DESCRIPTION

Ne pas utiliser **cleadow** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.

| cleadow | cleadow I | cleadow II |
|---|---|--|
| Eau à lentilles (Solution de dissolubilisation et de rinçage) | (Comprimés désinfectants, neutralisants, et nettoyeurs) | (Solution de dissolubilisation et de rinçage) |
|  Chaîne de remplissage 8 mL R = Droite L = Gauche |  Présence du symbole I, Δ Ne pas ingérer La povidone iodée détruit instantanément les micro-organismes nocifs tels que les bactéries, les champignons, et l'acanthamoeba. Par ailleurs, l'acide ascorbique neutralise la povidone iodée pour la rendre inoffensive pour l'homme. Enfin, l'enzyme protéolytique présent également dans le comprimé élimine complètement les dépôts protéiques. |  STERILE A Symbol II is printed Cette solution est utilisée pour dissoudre cleadow I et rincer les lentilles. |
| | Povidone iodée (4.0 mg/comprimé), acide ascorbique (2.0 mg/comprimé), et enzyme protéolytique (0.5 mg/comprimé) | Acide borique et peroxyde d'hydrogène comme conservateur |

CONSIGNES D'UTILISATION

- 1  Ouvrir l'étui et placer une lentille sur chaque support. Fermer l'étui soigneusement.
- 2  Ajouter un comprimé de **cleadow I** dans le fond de l'étui à lentilles et remplir l'étui avec **cleadow II** jusqu'à la chaîne de remplissage. Refermer l'étui soigneusement. Ne pas utiliser de comprimé décoloré ou cassé.
- 3  Laisser les lentilles dans leur étui pendant **4 heures minimum**. Le processus de nettoyage commence lorsque la solution change de couleur.
- 4  **Vérification de la couleur!** S'assurer que la solution et les lentilles sont entièrement incolores. Voir les **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI** ci-dessous si la présence de la couleur orange persiste après 4 heures.
- 5  Retirer les lentilles.
- 6  Rincer les lentilles dans la paume de la main avec **cleadow II** avant de les porter.

CONSERVATION

Une fois les étapes décrites ci-dessus terminées, il est nécessaire de remplacer la solution de désinfection ou de conservation de l'étui pendant plus de 24 heures. Les lentilles peuvent être conservées dans un étui à lentilles fermé jusqu'à 7 jours. Dans ce cas, avant de porter les lentilles, il est nécessaire de répéter les étapes de soin depuis le début.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser **cleadow** en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans **cleadow**.
- En cas de sensation d'inconfort permanent au niveau des yeux, de changements dans la vision, ou de rougeurs aux yeux, retirer ses lentilles immédiatement et consulter son ophtalmologiste ou un spécialiste des soins oculaires.
- Ne pas utiliser **cleadow** en même temps qu'un médicament pour les yeux ou qu'un autre produit d'entretien pour lentilles de contact.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Lire attentivement cette notice avant d'utiliser **cleadow** et s'y référer si besoin par la suite. Afin d'éviter toute infection ou lésion oculaire, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Se laver et se sécher les mains intégralement avant de manipuler les lentilles.
- Si, après avoir introduit un comprimé, la solution ne devient pas orange, jeter la solution, laver et sécher l'étui à lentilles puis recommencer les étapes de soin depuis le début selon ce mode d'emploi.
- Ne pas porter ses lentilles si la tâche orange persiste.
- Consulter un spécialiste des soins oculaires en cas de port de lentilles non neutralisées.
- S'assurer que la solution et les lentilles sont entièrement incolores avant de porter les lentilles. Si une teinte orange persiste après 4 heures, secouer légèrement l'étui à lentilles jusqu'à ce que la couleur disparaisse. Si elle persiste, jeter la solution et recommencer les étapes de soin depuis le début.
- Après chaque utilisation, vider tout résidu de solution **cleadow** de l'étui à lentilles.
- Après chaque utilisation de **cleadow**, laver l'étui à lentilles à l'aide d'une solution saline stérile et le laisser sécher à l'air libre.
- Les enfants ne doivent pas utiliser **cleadow** seuls ; les parents sont tenus d'être responsables des soins quotidiens.
- Utiliser exclusivement l'étui à lentilles conçu spécialement à cet effet par **cleadow**.
- Jeter la solution au bout de 3 mois après l'ouverture de la bouteille.
- Toujours employer **cleadow I** et **cleadow II** ensemble.
- Bien refermer le flacon après ouverture.
- Ne pas utiliser **cleadow** avec des lentilles dures ou rigides perméables aux gaz.
- Ne pas avaler la solution ou les comprimés.
- Ne pas toucher l'emboû de **cleadow II** afin d'éviter la contamination.
- Ne pas utiliser **cleadow** pour une désinfection à la chaleur.
- Ne pas utiliser de comprimé cassé.
- Ne pas utiliser **cleadow** après la date de péremption.
- N'utiliser ni la solution, ni le comprimé s'ils ont changé de couleur.
- Ne pas conserver **cleadow** dans un vieux étui à lentilles.
- Toujours utiliser le nouvel étui fourni.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Fermer le capuchon de **cleadow II** après chaque utilisation.
- Conserver les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- Ne pas remplacer **cleadow I** par un autre flacon.
- Ne pas conserver **cleadow** dans un vieux étui à lentilles.
- Toujours utiliser le nouveau étui fourni.
- Utiliser le comprimé directement après ouverture.
- Conserver toujours les comprimés dans leur emballage en aluminium lorsque ces derniers ne sont pas utilisés.
- Ne pas changer de système de nettoyage des lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung


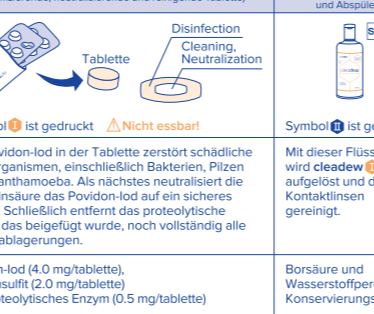

Desinfektion-, Reinigungs- und Aufbewahrungssystem

Desinfektionssystem für alle weichen Kontaktlinsen einschließlich solcher aus Silikonhydrogel zur Desinfektion, Neutralisierung und Entfernung von Eiweißablagerungen.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig bevor Sie **cleadow** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.

ZUSAMMENSETZUNG UND BESCHREIBUNG

Benutzen Sie **cleadow** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.

| cleadow | cleadow I | cleadow II |
|--|---|---|
| Kontaktlinsenbehälter (desinfizierende, neutralisierende und reinigende Tablette) | (Lösung zum Reinigen und Abspülen) | |
|  Deckel Fülllinie 8 mL R = rechts L = links |  Symbol I ist gedruckt, Δ Nicht essbar! Das Povidon-Iod in der Tablette zerstört schädliche Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilzen und Acanthamoeba. Als nächstes neutralisiert die Ascorbinsäure das Povidon-Iod auf ein sicheres Niveau. Schließlich entfernt das proteolytische Enzym, das beigefügt wurde, noch vollständig alle Proteinablagerungen. |  STERILE A Symbol II ist gedruckt Mit dieser Flüssigkeit wird cleadow I aufgelöst und die Kontaktlinsen gereinigt. |
| | Povidon-Iod (4.0 mg/Tablette), Natriumsulfat (2.0 mg/Tablette) und proteolytisches Enzym (0.5 mg/Tablette) | Borsäure und Wasserstoffperoxid als Konservierungsstoff |

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1  Öffnen Sie die Linsenhalter und legen Sie die Linse in eine der Mulden. Vorsicht beim Schließen der Linsenhalter.
- 2  Geben Sie ein Tablette **cleadow I** in die Rille auf dem Boden des Linsenbehälters und füllen Sie den Behälter mit **cleadow II** bis zur Fülllinie. Nach Gebrauch den Deckel fest verschließen. Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie zerbrochen oder verfärbt ist.
- 3  Weichen Sie die Linsen **mindestens 4 Stunden** lang ein. Der Reinigungsprozess beginnt, wenn sich die Farbe der Lösung verändert.
- 4  **Prüfen Sie die Farbe!** Stellen Sie sicher, dass die Lösung und die Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orange Farbe nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, lesen Sie bitte die **SICHERHEITSHINWEISE** unten.
- 5  Entnehmen Sie die Kontaktlinsen.
- 6  Spülen Sie die Linsen vor dem Einsetzen in Ihrer Handfläche mit **cleadow II** ab.

AUFBEWAHRUNG

Nachdem Sie die oben angeführten Schritte ausgeführt haben und die Kontaktlinsen länger als 24 Std. aufbewahren möchten, ist es empfehlenswert die Lösung gegen **cleadow II** auszutauschen. Sie können die Kontaktlinsen in dem ungeöffneten Behälter bis zu 7 Tage aufbewahren. Danach wiederholen Sie bitte die Pflege-Schritte, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen tragen.

WARNUNGEN

- Benutzen Sie **cleadow** nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Sollten Augenbeschwerden, tränende Augen, Veränderungen der Sicht oder eine Rötung der Augen auftreten, nehmen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen heraus und gehen Sie zu Ihrem Augenarzt.
- Benutzen Sie bitte **cleadow** nicht zusammen mit Augenmedikamenten oder anderen Kontaktlinsen-Pflegeprodukten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig, bevor Sie **cleadow** benutzen und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf. Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen.
- Waschen und trocknen Sie Ihre Hände immer gründlich ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anlassen.
- Fährt sich die Lösung nicht Orange, nachdem Sie die Tablette in die Lösung gelegt haben, schütten Sie die Lösung weg, waschen und trocknen Sie den Kontaktlinsenbehälter und wiederholen Sie die die Pflegeschritte von vorn, wie Sie in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.
- Tragen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nicht, wenn sie weißlich-orange gefärbt sind.
- Konsultieren Sie Ihren Augenarzt, wenn Sie nicht neutralisierte Kontaktlinsen getragen haben.
- Stellen Sie vor dem Einsetzen sicher, dass die Lösung und Kontaktlinsen völlig klar sind. Wenn die orange Farbe nach 4 Stunden immer noch vorhanden ist, schütten Sie den Behälter leicht, bis die Farbe verschwindet. Wenn die orange Farbe nicht verschwindet, entsorgen Sie die Lösung und führen Sie die Pflege-Schritte von vorne durch.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die im Kontaktlinsenbehälter verbliebende **cleadow**-Lösung.
- Waschen Sie den Kontaktlinsenbehälter nach jedem Gebrauch mit **cleadow** mit einer sterilen Salzlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- Kinder sollten **cleadow** nicht allein verwenden; Eltern werden gebeten, die tägliche Pflege zu übernehmen.
- Benutzen Sie nur den speziellen Kontaktlinsenbehälter, der mit **cleadow** geliefert wird.
- Schütten Sie die Reste der Lösung 3 Monate nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Benutzen Sie bitte immer nur **cleadow I** und **cleadow II** zusammen.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- cleadow** mit harten oder formstabilen, gasdurchlässigen (RGP) Kontaktlinsen NICHT verwenden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tabletten.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche von **cleadow II**, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- cleadow** ist nicht für Hitzedesinfektion geeignet.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn sie zerbrochen ist.
- Benutzen Sie **cleadow** nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- Lösung und Tablette bei Verfärbung nicht benutzen.
- Benutzen Sie **cleadow** nicht, wenn das Sicherheitsschild beschädigt ist oder fehlt.
- Kontaktlinsen nicht mit Leitungswasser spülen oder darin aufbewahren.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schein Sie den Verschluss von **cleadow I** nach jedem Gebrauch.
- Bewahren Sie die Produkte an einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie **cleadow I** nur mit dem dafür vorgesehenen Spezialbehälter.
- Bewahren Sie **cleadow** nicht in alten Kontaktlinsenbehältern auf.
- Benutzen Sie bitte immer den neuen mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter.
- Tablette nach Öffnung der Verpackung unverzüglich verwenden.
- Bewahren Sie bitte die Tabletten in der Aluminium-Verpackung auf, wenn Sie sie nicht brauchen.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.

ITALIANO | Istruzioni per l'uso


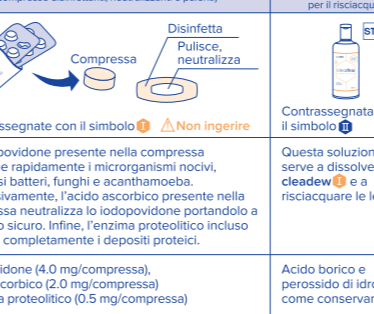

Sistema per disinfettare, pulire e conservare le lenti

Sistema che disinfetta, neutralizza e rimuove i depositi proteici da tutte le lenti a contatto morbide, incluse quelle in silicone idrogel.






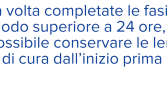
Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadow** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti che compongono **cleadow**.

| cleadow | cleadow I | cleadow II |
|---|---|---|
| Portaletti (compresse disinfectanti, neutralizzanti e pulenti) | (dissolvente e soluzione per il risciacquo) | |
|  Tappo Linea di riempimento 8 mL R = destra L = sinistra |  Contrasegnate con il simbolo I, Δ Non ingerire! Lo iodopovidone presente nella compressa distrugge rapidamente i microorganismi nocivi, inclusi i batteri, funghi e acanthamoeba. Successivamente, l'acido ascorbico presente nella compressa neutralizza lo iodopovidone portando ad un livello sicuro. Infine, l'enzima proteolitico incluso rimuove completamente i depositi proteici. |  STERILE A Symbol II is printed Questa soluzione serve a dissolvere cleadow I e a risciacquare le lenti. |
| | Iodopovidone (4.0 mg/compressa), acido ascorbico (2.0 mg/compressa) e enzima proteolitico (0.5 mg/compressa) | Acido bórico e perossido di idrogeno come conservanti |

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1  Aprire la gabbietta e posizionare ciascuna lente sul rispettivo supporto. Chiudere la gabbietta con cura.
- 2  Porre una compressa di **cleadow I** sul fondo del portaletti e riempire con **cleadow II** fino alla linea di riempimento. Chiudere bene il tappo. Non utilizzare compresse scolorite o danneggiate.
- 3  Immergere le lenti per **almeno 4 ore**. Il processo di pulizia comincia quando la soluzione cambia colore.
- 4  **Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore**. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, seguire le **PRECAUZIONI** sottoriscritte.
- 5  Togliere le lenti.
- 6  Prima di applicare le lenti, pulirle con **cleadow II** nel palmo della mano.

CONSERVAZIONE

Una volta completate le fasi indicate sopra, in caso di conservazione delle lenti per un periodo superiore a 24 ore, sostituire la soluzione con **cleadow II**. È possibile conservare le lenti nei portaletti mai aperto fino a 7 giorni, quindi ripetere le fasi di cura dall'inizio prima di indossarle.

AVVERTENZE

- Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti utilizzati in **cleadow**.
- In caso di persistente fastidio oculare, lacrimazione eccessiva, alterazioni della visione o arrossamento oculare, rimosuere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Non utilizzare **cleadow** con farmaci oculari o altri prodotti per la cura delle lenti a contatto.

PRECAUZIONI

- Leggere attentamente questo foglietto illustrativo prima di utilizzare **cleadow** e conservarlo per riferimento futuro. Per evitare infezioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Lavare e asciugare completamente le mani prima di manipolare le lenti.
- Se la soluzione non diventa arancione dopo avere aggiunto una compressa, eliminare la soluzione, lavare e asciugare il portaletti e ripetere le fasi di cura dall'inizio, come indicato nelle istruzioni per l'uso.
- Non indossare le lenti se il colore arancione persiste.
- Consultare uno specialista se sono state indossate lenti non neutralizzate.
- Prima di indossare le lenti, assicurarsi che non ci siano residui di colore né sulle lenti né nella soluzione. Se l'arancione è ancora visibile dopo 4 ore, disciolverlo scuotendo il portaletti. Se il colore resta, gettare la soluzione e ripetere le fasi di cura dall'inizio.
- Dopo ogni utilizzo, eliminare l'eventuale soluzione **cleadow** rimasta nel portaletti.
- Dopo ciascun utilizzo di **cleadow**, lavare il portaletti con soluzione salina sterile e lasciare asciugare all'aria secca.
- I bambini non devono usare **cleadow** da soli ; i genitori sono responsabili della loro cura quotidiana.
- Utilizzare solo con il portaletti specifico in dotazione con **cleadow**.
- Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 3 mesi dopo l'apertura del flacone.
- Utilizzare sempre **cleadow I** e **cleadow II** insieme.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Non utilizzare **cleadow** con lenti rigide gas permeabili.
- Non ingerire la soluzione o le compresse.
- Non toccare la punta di **cleadow II** per evitare la contaminazione.
- Non utilizzare compresse per dissimulare a caldo.
- Non utilizzare compresse danneggiate.
- Non utilizzare **cleadow** dopo la data di scadenza.
- Non utilizzare la soluzione o la compressa se scolorita.
- Consultare uno specialista se sono state indossate lenti non neutralizzate.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per conservare e risciacquare le lenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Chiudere bene il tappo di **cleadow II** dopo ogni utilizzo.
- Conservare i prodotti in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- Non sostituire **cleadow I** con un altro flacone.
- Non utilizzare **cleadow** con portaletti usati.
- Utilizzare sempre il portaletti fornito.
- Utilizzare la compressa immediatamente dopo l'apertura della confezione.
- Conservare sempre la compressa nella loro confezione in alluminio quando non utilizzate.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato uno specialista.

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza y conservación

Un sistema esterilizante para lentes de contacto que desinfecta, neutraliza y elimina las proteínas depositadas en todo tipo de lentes de contacto blandos incluido los de hidrogel de silicona.



Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de usar **cleadow** y guárdelo para futuras consultas. Para evitar infecciones y daño en los ojos, siga siempre las instrucciones del usuario.

COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN

No utilice **cleadow** si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

| cleadow | cleadow I | cleadow II |
|--|--|---|
| Estuche para lentes (Comprimidos desinfectantes, neutralizantes e limpiadores) | (Solución disolvente y para enjuagar) | |
|  Tapa Linea de llenado 8 mL R = derecha L = izquierda |  El símbolo I va impreso en el envoltorio, Δ No ingerir! La iodopovidona contenida en el comprimido destruye rápidamente los microorganismos nocivos, incluido el b. hongos y Acanthamoeba. Luego, el ácido ascórbico neutraliza la iodopovidona hasta alcanzar el nivel de seguridad. Por último, la enzima proteolítica elimina completamente los depósitos de proteínas. |  STERILE A Symbol II va impreso en el bote Esta solución se utiliza para disolver los comprimidos cleadow I y enjuagar los lentes. |
| | Iodopovidona (4.0 mg comprimido), ácido ascórbico (2.0 mg comprimido) y enzima proteolítica (0.5 mg comprimido) | Ácido bórico y peróxido de hidrógeno como conservantes |

INSTRUCCIONES DEL USUARIO

- 1  Abra el portaletti y coloque cada lente en su cavidad correspondiente. Cierre el portaletti con cuidado.
- 2  Coloque un comprimido de **cleadow I** en el fondo del estuche para lentes y llene el estuche con **cleadow II** hasta la línea indicada. Cierre la tapa firmemente. No utilice el comprimido si está decolorado o roto.
- 3  Deje los lentes en remojo por **al menos 4 horas**. El proceso de limpieza empieza después de que la solución haya cambiado de color.
- 4  **Asegurese de que la solución y los lentes son completamente transparentes**. Si el color aranciano permanece aún después de 4 horas, léase las **PRE**


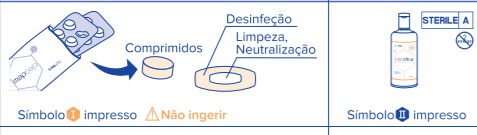

PORTUGUÉS | Instruções de utilização**Sistema de Desinfecção, Limpeza e Armazenamento**

Sistema de desinfecção de lentes de contato, o qual desinfeta, neutraliza e remove as proteínas depositadas em todos os tipos de lentes de contato hidrofílicas incluindo lentes de silicone hidrógel.


Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o **cleadow** e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.

COMPOSIÇÃO E DESCRIÇÃO

Não utilize o **cleadow** caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.

| cleadow Estajo das lentes | cleadow i (Comprimidos de Desinfecção, Neutralização e Limpeza) | cleadow ii (Solução Dissolvente e de Envasamento) |
|--|--|---|
|  |  <p>Desinfecção Limpeza, Neutralização</p> <p>Comprimidos</p> <p>Simbolo i Impresso ii Não ingerir</p> <p>A Iodopovidona no comprimido destrói rapidamente os micro-organismos, incluindo Bactérias, Fungos e Acanthamoeba. Em seguida, o Ácido ascórbico no comprimido neutraliza a Iodopovidona para que esta atinja um nível seguro. Por fim, a enzima proteolítica incluída remove completamente as proteínas depositadas.</p> <p>Iodopovidona (4.0 mg/comprimidos), Ácido ascórbico (2.0 mg/comprimidos) e enzima proteolítica (0.5 mg/comprimidos)</p> <p>Simbolo ii Impresso</p> <p>Esta solução é usada para dissolver o cleadow i e enxaguar as lentes.</p> <p>Ácido bórico e Peróxido de hidrogénio como conservante</p> |  <p>STERILE A</p> <p>Simbolo ii er trykt</p> <p>Denne løsning bruges til at opløse cleadow i og rense linserne.</p> <p>Denne opløsning anvendes for at løse upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i och skölja linserna.</p> <p>Povidone-jod (4.0 mg/tablett), Askorbinsyra (2.0 mg/tablett) og proteolytiske enzym (0.5 mg/tablett)</p> <p>Borsyre og Brintoveritt som konserveringsmiddel</p> |


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 

Abrir os suportes das lentes e colocar cada uma das lentes no respetivo recetáculo. Feche cuidadosamente os suportes das lentes.
- 

Adicione um comprimido de **cleadow **i**** no fundo do estajo das lentes e encha-o com **cleadow **ii**** até à linha de enchimento. Feche a tampa com firmeza. Não utilize comprimidos descolorados ou partidos.
- 

Deixe as lentes no solução durante **pele menos 4 horas**. O processo de limpeza começa assim que a solução tiver mudado de cor.
- 

Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas. Se a cor laranja se mantiver para além das 4 horas, consulte as PRECAUÇÕES abaixo.
- 

Retire as lentes.
- 

Enxagúe as lentes na palma da sua mão com **cleadow **ii**** antes de as colocar nos olhos.

ARMAZENAMENTO

Após completar os passos acima, deverá substituir a solução por **cleadow **ii****, caso vá armazenar as lentes por mais de 24 horas. Poderá armazenar as lentes no respetivo estajo fechado até 7 dias e repetir desde o início os passos do cuidado antes de colocar as lentes nos olhos.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilize o **cleadow** caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Caso sinta desconforto persistente nos olhos, lacrimar excessivo, alterações de visão ou olhos vermelhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o **cleadow** com outros medicamentos para os olhos ou produtos de cuidado de lentes de contato.

PRECAUÇÕES

- Leia com atenção este folheto de instruções antes de utilizar o **cleadow** e guarde-o para futuras consultas. Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares.
- Lave e seque completamente as mãos sempre que for a manusear as lentes.
- Se a solução não ficar laranjada depois de adicionar um comprimido, descarte a solução, lave e seque o estajo das lentes e repita os passos do cuidado desde o início, de acordo com as instruções de utilização.
- Não coloque as lentes nos olhos caso persistam as manchas laranja.
- Consulte um profissional da visão caso tenha usado lentes que não foram neutralizadas.
- Certifique-se de que a solução e as lentes estão completamente limpas antes de colocar as lentes nos olhos. Se a cor laranja se mantiver para além das 4 horas, agite levemente o estajo das lentes e deixe-o de lado durante 20-30 minutos. Verifique se a cor desapareceu. Se a cor laranja persistir, descarte a solução e repita os passos do cuidado desde o início.
- Após cada utilização, descarte a solução **cleadow** restante no estajo das lentes.
- Após cada utilização de **cleadow**, lave o estajo das lentes com solução salina esterilizada e deixe-o a secar ao ar.
- As crianças não deverão utilizar o **cleadow** sozinhas; os pais deverão responsabilizar-se pelo seu cuidado diário.
- Utilize apenas o estajo de lentes especialmente concebido para o **cleadow**.
- Descarte a solução restante 3 meses após a abertura do recipiente.
- Utilize sempre o **cleadow **ii**** juntamente com o **cleadow **i****.
- Feche o recipiente com firmeza após a utilização.
- Não utilize o **cleadow** com lentes duras ou rígidas permeáveis aos gases.
- Não inque a solução nem os comprimidos.
- Não toque na tampa do **cleadow **ii**** de forma a evitar a contaminação.
- Não utilize o **cleadow** para efetuar desinfecção por calor.
- Não utilize comprimidos partidos.
- Não utilize o **cleadow** uma vez expirada a data de validade.
- Não utilize a solução nem os comprimidos se estes estiverem descolorados.
- Não utilize **cleadow** que não apresente selo de segurança ou cujo selo esteja danificado.
- Não utilize água da torneira para armazenar e enxaguar as lentes.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Feche bem a tampa do **cleadow **ii**** após cada utilização.
- Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Não substitua o **cleadow **ii**** por nenhum outro recipiente.
- Não utilize o **cleadow** com um estajo de lentes velho.
- Utilize sempre o estajo novo de lentes fornecido.
- Utilize os comprimidos imediatamente após a abertura da embalagem.
- Guarde sempre os comprimidos nas respetivas embalagens de alumínio quando não forem utilizadas.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar um profissional da visão.

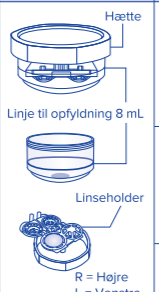
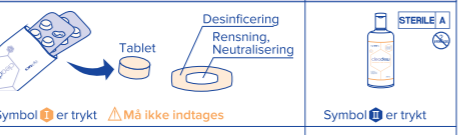
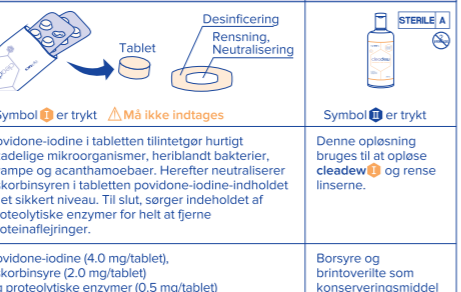
DANSK | Brugsanvisning**System til desinficering, rensning og opbevaring**

System til desinficering af kontaktlinser, som desinficerer, neutraliserer og fjerner proteinaflejringer til alle bløde kontaktlinser, heriblandt silikone-hydrogel linser.


Læs dette instruktionsblad omhyggeligt, inden du bruger **cleadow**, og gem det til fremtidige henvisninger. Følg altid brugsanvisningen for at forebygge øjeninfektioner eller skader.

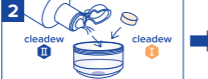
KOMPOSITION OG BESKRIVELSE

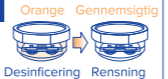
Brug ikke **cleadow**, hvis du er allergisk over for nogle af de anvendte ingredienser.


| cleadow Linsestui | cleadow i (Desinficerende, neutraliserende og rensende tablet) | cleadow ii (Opløsende og skyljende løsning) |
|---|--|--|
|  |  <p>Desinficering Rensning, Neutralisering</p> <p>Symbol i er trykt ii Må ikke indtages</p> <p>Povidone-jod i tablettien tilintættør hurtigt skadelige mikroorganismer, inkluderet bakterier, svampe og Acanthamoeba. Sædan neutraliserer askorbinsyren i tablettien Povidon-joden til et sikkert niveau. Til slut, sørger indeholdet af proteolytiske enzymer for helt at fjerne proteinaflejringer.</p> <p>Povidone-jod (4.0 mg/tablett), askorbinsyra (2.0 mg/tablett) og proteolytiske enzym (0.5 mg/tablett)</p> <p>Denne opløsning bruges til at opløse cleadow i og rense linserne.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i och skylja linserna.</p> <p>Borsyra och Brintoveritt som konserveringsmiddel</p> |  <p>STERILE A</p> <p>Symbol ii er trykt</p> <p>Denne løsning anvendes for at løse upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i och skölja linserna.</p> <p>Povidon-jod (4.0 mg/tablett), Askorbinsyra (2.0 mg/tablett) og proteolytiske enzym (0.5 mg/tablett)</p> <p>Borsyra och Väteperoxid som konserveringsmedel</p> |


BRUGERANVISNINGER


- 

Åbn linseholderen og anbring linse på bunden af linsestuet, luk linseholderen omhyggeligt.
- 

Tilføj en **cleadow **i**** tablet i rillen på bunden af linsestuet, og fyld etuiet med **cleadow **ii**** op til oplydningslinjen. Luk hæftet helt. Brug ikke tabletter der er misfarvede eller ikke intakte.
- 

Læg linserne i båd i **mindst 4 timer**. Rensningsprocessen begynder, når opløsningens farve ændres.
- 

Kontroller farven!
- 

Tag linserne ud.
- 

Skyll linserne i din håndflade med **cleadow **ii****. Inden du sætter dem i.

OPBEVARING

Hvis du opbevarer linserne i mere end 24 timer, skal opløsningen udskiftes med **cleadow **ii**** efter påstanden på produktets tryk. Du kan eventuelt opbevare linserne i det uåbnede etui op til 7 dage, og så gentage vedligeholdelsestrinnene fra begyndelsen, inden du sætter linserne i.

ADVARSLER

- Brug ikke **cleadow**, hvis du er allergisk over for nogle af de anvendte ingredienser.
- Hvis du oplever vedvarende øjenirritation, dine øjne løber, synsforstyrrelser eller får røde øjne, skal du straks tage dine linser ud, og kontakte din øjnlæge eller øjenspecialist.
- Brug ikke **cleadow** med nogen øjenmedicin eller andre produkter til kontaktlinser.

FORHOLDSREGLER

- Læs dette instruktionsblad omhyggeligt, inden du bruger **cleadow**, og gem det til fremtidig henvisning.
- Tvætta og tørk alltid dine hænder grundigt, inden du håndterer dine linser.
- Hvis opløsningen ikke blir oransje etter at du har lagt i en tablett, kassera løsningen, tvætta og tørk linsestaket, oppreda sedan omvårdnadsstegen fra början, enligt användarinstruktionerna.
- Sæt ikke linse linser i, hvis farven stadig er orange.
- Rådfrå med din kontaktlinseinstallatør, hvis du har brugt linser, der ikke var neutraliserede.
- Sorg for, at opløsningen og linserne er helt gennemslagte. Hvis farven stadig er orange efter 4 timer, skal linsestaket trykkes let, og hvile i ca. 20 minutter. Kontroller, om farven er forsvundet. Hvis farven stadig er orange, skal opløsningen bortkaffes, og vedligeholdelsestrinnene gentages fra begyndelsen.
- Efter hver brug, bortkaffes éventuel **cleadow**-opløsning, som bliver tilslået i linsestuet.
- Efter hver brug af **cleadow**, vaske linsestuet med steril saltvandsopløsning og lufttørres.
- Børn må ikke bruge **cleadow** alene. Forældrene skal være ansvarlige for deres daglige pleje.
- Brug kun det specifikt designdede linsestui, som følger med **cleadow**.
- Bortkaff eventuel resterende opløsning 3 måneder efter flaskens åbning.
- Brug altid **cleadow **i**** og **cleadow **ii**** sammen.
- Luk flasken helt efter brug.
- Brug ikke **cleadow** med hårde eller formfaste linser.
- Opløsningen eller tabletterne må ikke indtages.
- Brug ikke vask fra vandslangen til at opbevare eller skylle linserne.
- Skål opbevares uden for børns rækkevidde.
- Sitram hæften på **cleadow **i**** efter hver brug.
-   Opbevar produktet på et tørt sted ved stuetemperatur, og undgå direkte sollys.
- Erstat ikke **cleadow **ii**** med nogen anden beholder.
- Brug ikke **cleadow** efter udløbsdatoen.
- Brug ikke opløsningen eller tablettien, hvis den er misfarvet.
-   Brug ikke **cleadow**, hvis den beskyttende forsegling er beskadiget eller mangler.
- Brug ikke væd fra vandhånen til at opbevare eller skylle linserne.
-   Skal opbevares uden for børns rækkevidde.
-   Opbevar produktet på et tørt sted ved stuetemperatur, og undgå direkte sollys.
-   Erstat ikke **cleadow **ii**** med nogen anden beholder.
- Brug ikke **cleadow** med et gammelt linsestui.
- Brug altid det nye linsestui, som følger med produktet.
- Brug tablettien umiddelbart efter åbning af pakken.
- Opbevar altid tabletterne i deres aluminiumspakke, når ikke de bruges.
- Kontaktlinsernes vedligeholdelsessystem må ikke ændres uden, at du først rådfører med din kontaktlinseinstallatør.

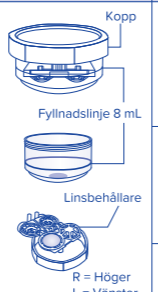
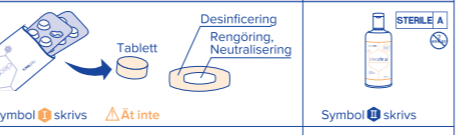

SVENSKA | Instruktioner för användning**Desinficering, Rengöring och Förvaringsssystem**

Desinficeringssystem för kontaktlinser som desinficerar, neutraliserar och tar bort proteinavlagringar på alla mjuka kontaktlinser inklusive silikon hydrogel-linser.


Läs detta instruktionsblad noga innan användning av **cleadow** och behåll det för framtida referens. För att undvika ögoninfektion eller skada, följ alltid användarinstruktionerna.

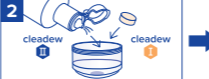
SAMMANSÄTTNING OCH BESKRIVNING


Använd inte **cleadow** om du är allergisk mot någon av ingredienserna som ingår i **cleadow**.


| cleadow Linsedofal | cleadow i (Desinficering, Rengöring, Neutraliserande) | cleadow ii (Upplösende och skyljande lösning) |
|---|---|---|
|  |  <p>Desinficering Rengöring, Neutralisering</p> <p>Symbol i skrivs ii Må inte</p> <p>Povidon-jod i tablettien förstör snabbt skadliga mikroorganismer, inkluderat bakterier, svampar och Acanthamoeba. Sedan neutraliserer askorbinsyran i tablettien Povidon-joden till en säker nivå. Slutligen tar det proteolytiska enzymet bort alla proteinavlagringar.</p> <p>Povidon-jod (4.0 mg/tablett), Askorbinsyra (2.0 mg/tablett) og proteolytiske enzym (0.5 mg/tablett)</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i och skylja linserna.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Borsyra och Väteperoxid som konserveringsmedel</p> |  <p>STERILE A</p> <p>Symbol ii skrivs</p> <p>Denne løsning anvendes for at løse upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i og skölja linserna.</p> <p>Borsyra och Väteperoxid som konserveringsmedel</p> |


ANVÄNDARINSTRUKTIONER


- 

Öppna linsehållarna och placera varje linse på varje kugle. Stäng linsehållarna varsamt.
- 

Lägg i en **cleadow **i**** tablett i skåpan i botten av linsestuet och fyll fodret med **cleadow **ii**** upp till fyllningslinjen. Slut kappen ordentligt. Använd inte tabletten om den är misfärgad eller trasig.
- 

Blöttägg linserna i **mindst 4 timmar**. Rengöringsprocessen börjar när lösningens färg förändras.
- 

Kontrollera färgen!
- 

Ta ur linserna.
- 

Skölj linserna i handflatan med **cleadow **ii**** innan du använder dem.

FÖRVARING

Efter att ha utfört stegen ovanför, om linserna skall förvaras i mer än 24 timmar, bör du ersätta lösningen med **cleadow **ii**** efter påstånden på produktets tryk. Du kan förvara linserna i ett öppnadt linsedofal i upp till 7 dagar och sedan upprepa omvårdnadsstegen från början innan du använder dina linser.

VARNINGAR

- Använd inte **cleadow** om du är allergisk mot någon ingrediens som används i **cleadow**.
- Om du upplever ihållande obehag i ögat, ögat klåda, synförändring eller att ögat blir rött, ta ur linserna direkt och rådfråga din ögonläkare eller specialister.
- Använd inte **cleadow** tillsammans med andra ögonvårdsprodukter eller andra vårdprodukter för kontaktlinser.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Läs detta instruktionsblad noga innan användning av **cleadow** och behåll det för framtida referens. För att undvika ögoninfektion, följ alltid användarinstruktionerna.
- Tvätta och torka alltid dina händer helt innan du hanterar dina linser.
- Om lösningen inte blir oransje efter att du har lagt i en tablett, kassera lösningen, tvätta och tørk linsestaket, oppreda sedan omvårdnadsstegen från början, enligt användarinstruktionerna.
- Använd inte linserna om den orangea färgen kvarstår.
- Rådfrå med din optiker om du har använt icke neutraliserade linser.
- Säkerställ att lösningen och linserna är helt klara innan användning av linserna. Om orange färg finns kvar efter 4 timmar, ska linsestaket försiktigt och lågg det åt sidan i 20-30 minuter. Kolla om färgen försvunnit. Om orange färg finns kvar, kassera lösningen och upprepa omvårdnadsstegen från början.
- Efter varje användning, kassera den **cleadow**-lösning som finns kvar i linsedofalet.
- Barn bör inte använda **cleadow** själva; föräldrarna ansvarar för deras dagliga vård.
- Använd endast det specialdesignade linsestuet som följer med **cleadow**.
- Kast all gjenvarende lösning 3 månader efter att flaskan öppnats.
- Använd alltid **cleadow **i**** og **cleadow **ii**** tillsammans.
- Stäng flaskan ordentligt efter användning.
- Använd inte **cleadow** med hårda eller stabila gaspermeable linser.
- Svälj inte lösning eller tablett.
- För att undvika kontaminering, rör inte toppen på **cleadow **i****.
- Använd inte **cleadow** för desinficering av brännkskador.
- Använd inte tablettien om den är trasig.
- Använd inte **cleadow** efter utgången förbrukningsdatum.
- Använd inte lösningen eller tablettien om den är misfärgad.
-   Använd inte **cleadow** om manipuleringsföretningen är skadad eller saknas.
- Använd inte kravetten för att förvara och skölja linserna.
-   Förvara utom räckhåll för barn.
- Försätt korken på **cleadow **i**** efter varje användning.
-   Opbevar produkterna på en torr plats i rumstemperatur, undvik direkt sollys.
- Erstat inte **cleadow **ii**** med någon annan behållare.
- Använd inte **cleadow** med ett gammalt linsestui.
- Använd alltid det nya linsestuet som följer med.
- Använd tablettien direkt efter att förpackningen öppnats.
- Förvara alltid tabletterna i deras aluminiumförpackning när de inte används.
- Andra inte vårdsystemet för kontaktlinserna utan att rådfråga en ögonläkare eller kontaktlinseinstallatör.

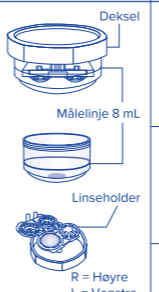
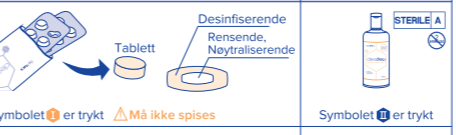
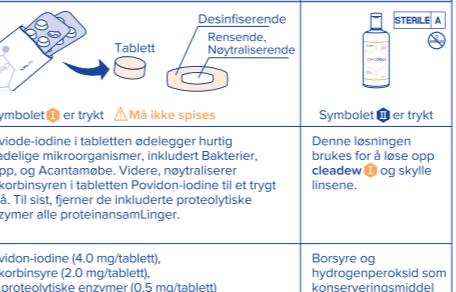
NORSK | Bruksanvisning**Desinfeksjon-, rens- og oppbevaringssystem**

Desinfeksjonssystem for kontaktlinser som desinfiserer, nøytraliserer, og fjerner proteinansamlinger for alle myke kontaktlinser inkludert silikon hydrogel linser.


Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker **cleadow**, og behold den for framtidig referanse. For å unngå øyefeksjon eller skade, følg alltid bruksanvisningen.


SAMMENSETNING OG BESKRIVELSE


Ikke bruk **cleadow** dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene brukt i **cleadow**.


| cleadow Linsestui | cleadow i (Desinfiserende, nøytraliserende, og rensende tablett) | cleadow ii (Upløsende og skyljende løsning) |
|---|--|---|
|  |  <p>Desinfiserende Rensende, Nøytraliserende</p> <p>Symbol i er trykt ii Må ikke spises</p> <p>Poviodi-iodin i tablettien dekkerer hurtig skadelige mikroorganismer, inkluderet Bakterier, Sopp, og Acanthamoeba. Videre, nøytraliserer Askorbinsyren i tablettien Poviodon-iodin til et trygt nivå. Til sist, fjerner de inkluderte proteolytiske enzymer alle proteinansamlinger.</p> <p>Povidon-iodin (4.0 mg/tablett), Askorbinsyre (2.0 mg/tablett), og proteolytiske enzym (0.5 mg/tablett)</p> <p>Denne løsningen brukes for å løse opp cleadow i og skylje linserne.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Borsyre og hydrogenperoxid som konserveringsmiddel</p> |  <p>STERILE A</p> <p>Symbol ii er trykt</p> <p>Denne løsning anvendes for at løse upp cleadow i og skylje linserna.</p> <p>Denna lösning används för att lösa upp cleadow i og skölja linserna.</p> <p>Borsyra och hydrogenperoxid som konserveringsmedel</p> |


BRUKSANVISNING


- 

Åpne linseholderen og plasser hver linse på hver kugle. Lukk linseholderen forsiktig.
- 

Tilsett en tablett med **cleadow **i**** i sporet i bunnen av linsestuet og fyll etuiet med **cleadow **ii**** opp til målelinjen. Lukk dekslet skikkelig. Ikke bruk tablettens dersom den er misfarget eller ødelagt.
- 

Bløttlegg linsene i **minst 4 timer**. Rensningsprosessen begynner etter at färgen på løsningen endres.
- 

Sjekk färgen!
- 

Fjern linsene.
- 

Skyll linsene i håndflaten med **cleadow **ii**** for du bruker dem.

OPPBEVARING

Efter at du har gjennomført stegene over, dersom du skal oppbevare linsene i mer enn 24 timer, bør du erstatte løsningen med **cleadow **ii****. Du kan oppbevare linsene i det uåpnede linsestuet i opptil 7 dager, og gjenta deretter vedlikeholdstegene fra begynnelsen når du bruker linsene dine.

ADVARSLER

- Ikke bruk **cleadow** dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene brukt i **cleadow**.
- Dersom du opplever vedvarende ubehag i øyene, overdreven tåreproduksjon, synsforandring, eller rødhet på øyet, fjern linserne umiddelbart og konsulter øyegelgen din eller optiker.
- Ikke bruk **cleadow** med noen øyemedisin eller andre linsevedlikeholdssystem.

FÖRHÄNDSREGLER

- Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker **cleadow**, og behold den for framtidig referanse. For å unngå øyefeksjoner, følg alltid bruksanvisningen.
- Alltid vask og tørk hendene dine fullstendig før du håndterer linserne dine.
- Dersom løsningen ikke blir oransje etter at du har lagt inn en tablett, kast løsningen, vask og tørk linsestuet, og gjenta vedlikeholdstegene fra begynnelsen i henhold til bruksanvisningen.
- Ikke bruk linserne dersom oransjefärgen vedvarer.
- Kontakt din optiker dersom du har bruk u-nøytralisererte linser.
- Forsikre deg om at løsningen og linserne er helt klare for du bruker linserne. Dersom det fortsatt er orange färg etter 4 timer, rist linsestuet forsiktig og legg til side i 20-30 minutter. Sjekk om färgen har forsvunnit. Dersom färgen vedvarer, kast løsningen og repeter vedlikeholdstegene fra begynnelsen.
- Efter hvert bruk, kast all **cleadow**-lösning som er igjen i linsestuet.
- Efter hvert bruk av **cleadow**, vaske linsestuet med steril saltvannsløsning og lät det lufttørke.
- Barn bør ikke bruke **cleadow** alene; foreldre oppfordres til å være ansvarlig for deres daglige vedlikehold.
- Bruk bare de spesialdesignerte linsestue som følger med **cleadow**.
- Kast all gjenvarende lösning 3 måneder etter at flasken er åpnet.
- Brük alltid **cleadow **i**** og **cleadow **ii**** sammen.
- Lukkk flasken forsiktig etter bruk.
- Ikke bruk **cleadow** med harde eller stive gassgjennomtrengelige linser.
- Ikke sveig løsningen eller tablettene.
- Ikke rør toppen av **cleadow **i**** for å unngå forurenning.
- Ikke bruk **cleadow** for varmeinfeksjoner.
- Använd inte tablettien om den är trasig.
- Ikke bruk **cleadow** etter utgången forbrukningsdatum.
- Ikke bruk løsningen eller tablettens dersom den er misfarget.
-   Ikke bruk **cleadow** dersom forsengingen er skadet eller manglende.
- Ikke bruk springvann for å opbevare og skylle linserne.
-   Opbebares utlilgjengelig for barn.
- Sikre alltid dekslet på **cleadow **i**** etter hvert bruk.
-   Opbevar produktet på et tørt sted i rumtemperatur, unngå direkte sollys.
- Ikke erstatt **cleadow **ii**** med noen andre beholdere.
- Ikke bruk **cleadow** med et gammelt linsestui.
- Brük alltid det nye linsestuet som følger med.
- Brük tablettien umiddelbart etter å ha åpnet pakken.
- Opbevar alltid tabletterna i aluminiumspakningen när de ikke er i bruk.
- Ikke eldre vedlikeholdssystemet til kontaktlinserne uten å konsultere optiker.