



INTERNETVRIJ:
UITSLUITEND VOOR
DE CONTACTLENS-
SPECIALIST



Fresh Ultimate®

- **Onderscheidend beter**
- **Internetvrij: uitsluitend voor de professional**
- **Breed programma**
- **Betrouwbare leverancier**
- **Sluit aan bij receptwerk lenzen**
- **Concurrerend in prijs**


Fresh Ultimate®

Belangrijkste kenmerken:

- Laatste generatie siliconen hydrogel materiaal.
- Breed leveringsbereik.

Bijzonderheid:

- Onderscheidend beter.
- Internetvrij: uitsluitend voor de contactlensspecialist.
- Betrouwbare leverancier.
- Sluit aan bij receptwerk lenzen.
- Concurrerend in prijs.

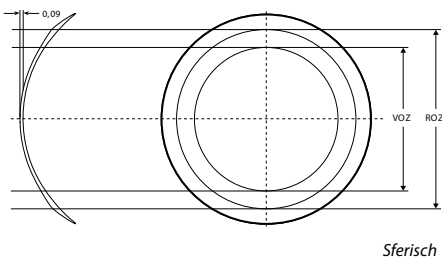

Materiaalspecificaties

USAN naam	Aerofilcon A
Wateropname	69 %
Dk/t waarde	76 (FATT)
i/ni	non ionisch
Modulus	0.42 Mpa
Centrale middendikte (@-3.00 dpt)	0.09 mm
Optische zonegrootte (@-3.00 dpt)	9.25 mm
UV-blocker	ja
Draagmodaliteit	daily wear
Verzorging	chemische of peroxide desinfectie
Vervangingsmodaliteit	maandelijks
Verpakkingseenheid	6-pack

Sterkte- en radiusbereik Fresh Ultimate:

Radius	8.50 en 8.80 mm
Diameter	14.2 mm
Sterktebereik	- 0.25 t/m – 6.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) - 6.50 t/m – 12.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.) + 0.25 t/m + 5.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) + 5.50 t/m + 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)
Anmeetadvies	Vlakste cornea radius \leq 8.00 mm: kies C.I. radius 8.50 mm Vlakste cornea radius $>$ 8.00 mm.: kies C.I. radius 8.80 mm





INTERNETVRIJ:
UITSLUITEND VOOR
DE CONTACTLENS-
SPECIALIST



Fresh Ultimate® Torisch

- Onderscheidend beter
- Internetvrij: uitsluitend voor de professional
- Breed programma
- Betrouwbare leverancier
- Sluit aan bij receptwerk lenzen
- Concurrerend in prijs

062011


Fresh Ultimate® Torisch

Belangrijkste kenmerken:

- Laatste generatie siliconen hydrogel materiaal.
- Breed leveringsbereik.

Bijzonderheid:

- Onderscheidend beter.
- Internetvrij: uitsluitend voor de contactlensspecialist.
- Betrouwbare leverancier.
- Sluit aan bij receptwerk lenzen.
- Concurrerend in prijs.

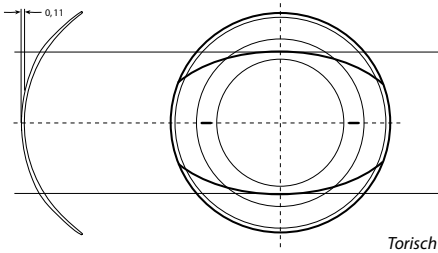

Materiaalspecificaties

USAN naam	Aerofilcon A
Wateropname	69 %
Dk/t waarde	76 (FATT)
i/ni	non ionisch
Modulus	0.42 Mpa
Centrale middendikte (@-3.00 dpt)	0.09 mm
Optische zonegrootte (@-3.00 dpt)	9.25 mm
UV-blocker	ja
Draagmodaliteit	daily wear
Verzorging	chemische of peroxide desinfectie
Vervangingsmodaliteit	maandelijks
Verpakkingseenheid	6-pack

Sterkte en radiusbereik Fresh Ultimate Torisch:

Radius	8.60 mm
Diameter	14.4 mm
Sterktebereik	plan t/m - 6.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) - 6.50 t/m - 8.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.) + 0.25 t/m + 4.00 dpt. (in 0.25 dpt. opl.) + 4.50 t/m + 6.00 dpt. (in 0.50 dpt. opl.)
Sterktebereik cilindrisch	-0.75, -1.25, -1.75 en -2.25 dpt.
Asstanden	Rondom in 10 graden stappen
Bijzonderheden:	Symmetrisch dynamische stabilisering waardoor de lens geen prismatische bijeffecten geeft. Lasergraveningen op 0 en 180 graden.

INTERNETVRIJ:
UITSLUITEND VOOR
DE CONTACTLENS-
SPECIALIST

